



Microdent[®]

Aparelhos Médicos e Odontológicos

Desde
1987

**LINHA
ODONTOLÓGICA**



A qualidade que marca !



Desde 1987, produzindo com qualidade, trazendo inovações aos setores médico e odontológico

Há mais de 28 anos a Microdent® fornece produtos de alta qualidade, confiabilidade e durabilidade ao mercado, atendendo aos requisitos regulamentares vigentes, priorizando a satisfação e as necessidades de seus clientes.

Dispõe atualmente de equipamentos de controle numérico de última geração (sistemas computadorizados), permitindo a obtenção de peças com grande precisão.

ÍNDICE

● Alta Rotação	3
● Baixa Rotação	4
● Cirurgia e Implantodontia	5
● Profilaxia	5
● Kits Acadêmicos	6
● Ferramentas	6
● Destaques Microdent®	7

ALTA ROTAÇÃO

Registro ANVISA 10309310008

As canetas de alta rotação da Microdent® possuem turbina balanceada eletronicamente, baixo nível de ruído e conexão Borden. São anatômicas, muito leves e autoclaváveis. Disponíveis no sistema convencional (saca brocas) ou Push Button (dispensa saca brocas).

Classic - Código: 1000

- Médio torque;
- Sistema de fixação da broca FG (Friction Grip);
- Sistema de conexão Borden (universal 2 furos);
- Spray simples (único) para refrigeração da broca;
- Pressão de trabalho de 30 a 35 psi;
- Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
- Autoclavável até 135°C.

Microroll - Código: 1150

- Médio torque;
- Sistema de fixação da broca FG (Friction Grip);
- Sistema de conexão Borden (universal 2 furos);
- Spray simples (único) para refrigeração da broca;
- Pressão de trabalho de 30 a 35 psi;
- Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
- Autoclavável até 135°C.

Suprema III - Código 1250

- Alto torque;
- Sistema de fixação da broca FG (Friction Grip);
- Sistema de conexão Borden (universal 2 furos);
- Spray triplo para refrigeração da broca;
- Pressão de trabalho de 30 a 35 psi;
- Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
- Autoclavável até 135°C;
- Leve e anatômica, caracterizada pela cabeça de tamanho médio;
- Excelente acabamento.

Suprema III Push Button - Código 1350

- Alto torque;
- Sistema de fixação da broca PB (Push-Button);
- Dispensa o uso de saca- broca;
- Sistema de conexão Borden; (universal 2 furos);
- Spray triplo para refrigeração da broca;
- Pressão de trabalho de 30 a 35 psi;
- Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
- Autoclavável até 135°C;
- Leve e anatômica, possui excelente acabamento superficial que facilita a assepsia e desinfecção.



Acompanha

- 1 Embalagem para acomodação.
- 1 Óleo lubrificante 10 ml.

1 Saca brocas para modelos convencionais: (Classic 1000 / Microroll 1150 / Suprema III 1250).



BAIXA ROTAÇÃO

Registro ANVISA 10309310007

Micro Motor Intra
6000 (sem refrigeração)



Contra Ângulo
Intra
8000 (sem
refrigeração)



Ponta Reta
Intra
7030 (com
refrigeração)



Micro Motor
Turbo
2040 (com
refrigeração)



Contra Ângulo
Standard
5000 (sem
refrigeração)



As peças de mão de baixa rotação da Microdent® possuem sistema de acoplamento *doriot* ou intra, baixo nível de ruído, alto torque, conexão Borden, lubrificação a óleo. São anatômicas, muito leves e autoclaváveis. Permitem giro de 360° sobre o micro motor.

Micro Motor Intra

Código: 6000 (sem refrigeração) / 6030 (com refrigeração)

- Alto torque;
- Sistema de acoplamento universal Intra;
- Conexão Borden;
- Anel regulador de rotação de 0 a 20.000 rpm;
- Pressão de trabalho de 40 a 45 psi;
- Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
- Autoclavável até 135°C.

Contra Ângulo Intra

Código: 8000 (sem refrigeração) / 8030 (com refrigeração)

- Transmissão de 1:1;
- Acoplamento universal Intra;
- Pressão de trabalho de 40 a 45 psi;
- Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
- Autoclavável até 135°C.

Ponta Reta Intra

Código 7000 (sem refrigeração) / 7030 (com refrigeração)

- Transmissão de 1:1;
- Acoplamento universal Intra;
- Pressão de trabalho de 40 a 45 psi;
- Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
- Autoclavável até 135°C.

Micro Motor Turbo

Código 2000 (sem refrigeração) / 2040 (com refrigeração)

- Alto torque;
- Sistema de acoplamento *Doriot*;
- Conexão Borden;
- Anel regulador de rotação de 0 a 25.000 rpm;
- Pressão de trabalho de 40 a 45 psi;
- Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
- Autoclavável até 135°C.

Contra Ângulo Standard

Código 5000 (sem refrigeração) / 5040 (com refrigeração)

- Transmissão de 1:1;
- Acoplamento *Doriot*;
- Pressão de trabalho de 40 a 45 psi;
- Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;
- Autoclavável até 135°C.



Acompanha

1 Embalagem para acomodação.

1 óleo lubrificante 10 ml.

Sistema de refrigeração para os modelos com refrigeração: (2040 / 6030 / 5040 / 8030 / 7030).

CIRURGIA E IMPLANTODONTIA

Registro ANVISA 10309310007

Produtos desenvolvidos com formas anatômicas e peso ideal, específico para procedimentos cirúrgicos. Excelente acabamento, facilitando a assepsia e desinfecção. Confeccionado com materiais leves e de alta resistência.

Contra Ângulo

Código: 8116 (Redução 16:1) / 8120 (Redução 20:1)

- Indicado para cirurgias em Implantodontia;
- Sistema de acoplamento Intra;
- Autoclavável até 135°C;
- Versátil: 12 posições diferentes de acoplamento da cabeça;
- Sistema de refrigeração acoplado.

Peça Angular Intra

Código: 7100 (com refrigeração)

- Específica para cirurgias precisas;
- Sistema de acoplamento Intra;
- Autoclavável até 135°C;
- Ponta fina e ângulo correto para irrigação.



Acompanha

- 1 Embalagem para acomodação.
- 1 óleo lubrificante 10 ml.
- Sistema de Refrigeração.



Peça Angular Intra
7100

Contra Ângulo
8116

PROFILAXIA

Peças com formato anatômico fabricadas com material leve, que facilita o uso para o profissional. Design diferenciado e excelente acabamento, facilitando a assepsia e a desinfecção.

Seringa Tríplice

Código 4005 (Registro ANVISA - 10309310002)

- 100% ar seco;
- Jato de água;
- Spray uniforme no bico;
- Sistema de conexão através de tubos que acoplam as mangueiras do equipo do profissional;
- Autoclavável até 135°C.

Ultraflash

Código 9600 (Registro ANVISA - 10309310005)

- Frequência de oscilação de 3.000 a 8.000 Hz;
- Remove tártaros e cálculos;
- Acopla no terminal de Alta Rotação (Borden);
- Pressão de trabalho entre 30 e 35 psi;
- Spray de refrigeração;
- Autoclavável até 135°C.



Acompanha

- 1 Embalagem para acomodação.
- 1 óleo lubrificante 10 ml.
- * Exclusivo para o modelo 9600:
- 3 insertos (Periodontia, Universal e Sickle).
- 1 chave de inserção dos insertos.



Ultraflash
9600*

Seringa
Tríplice
4005

KITS ACADÊMICOS

Registro ANVISA - Alta Rotação: 10309310008 / Baixa Rotação: 10309310007

Destinado a estudantes de graduação em Odontologia, os Kits Acadêmicos Microdent® possuem garantia contra defeitos de fabricação estendida até o final do curso do aluno.



Standard Classic (sem refrigeração)

Código: 0301700001

- 01 Alta Rotação Classic;
- 01 Baixa Rotação Micro Motor Turbo (sem refrigeração);
- 01 Contra Ângulo Standard (sem refrig.).

Intra Super Luxo III (com refrigeração)

Código: 03017000034

- 01 Alta Rotação Suprema Push Button III;
- 01 Baixa Rotação Micro Motor Intra (com refrig.);
- 01 Contra Ângulo Intra (com refrig.);
- 01 Ponta Reta Intra (com refrig.).



Intra Microroll (sem refrigeração)

Código: 03017000015

- 01 Alta Rotação Microroll;
- 01 Baixa Rotação Micro Motor Intra (sem refrig.);
- 01 Contra Ângulo Intra (sem refrig.);
- 01 Ponta Reta Intra (sem refrig.).

Standard Classic (com refrigeração)

Código: 03017000019

- 01 Alta Rotação Classic;
- 01 Baixa Rotação Micro Motor Turbo (com refrig.);
- 01 Contra Ângulo Standard (com refrig.).



A Microdent® oferece um total de 16 kits acadêmicos com composições diferentes, que atendem alunos de todas as etapas de graduação em Odontologia.

FERRAMENTAS

Ferramentas desenvolvidas especialmente para uso exclusivo em toda a linha odontológica Microdent®.

Kit Completo de Ferramentas

Código: 02017000027



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

A Microdent® também oferece ao mercado uma grande variedade de peças de reposição para sua Linha Odontológica, componentes rigorosamente inspecionados, garantindo assim uma maior segurança em sua utilização e um alto padrão de qualidade e confiabilidade.


DESTAQUES

Em todos os seus departamentos a Microdent® conta com o trabalho de profissionais altamente qualificados e treinados, que garantem excelente desempenho em todas as etapas de produção.

A mão-de-obra qualificada, aliada ao emprego de alta tecnologia, assegura a fabricação de produtos com maior durabilidade e precisão que atendem às exigências e necessidades do mercado consumidor.

Balanceadora Eletrônica

Permite a produção de peças mais silenciosas, com maior durabilidade e menor vibração.

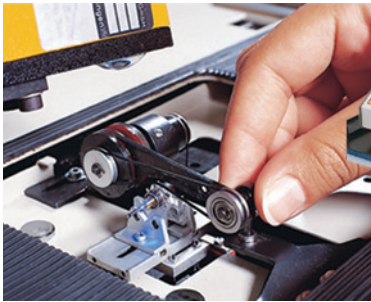

O constante investimento em equipamentos com tecnologia de ponta e o cumprimento rigoroso dos requisitos regulamentares vigentes são práticas características que norteiam a filosofia de trabalho da Microdent®.



Entre outras vantagens, a Microdent® atende em todo o território nacional e seus produtos também podem ser comprados com o Cartão BNDES. Acesse o site www.microdent.com.br e confira.



www.microdent.com.br

+55 (16) 3625 5595

+55 (16) 3625 8392

+55 (16) 3610 7666



Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virgínia
CEP: 14030-430 - Ribeirão Preto-SP / Brasil
microdent@microdent.com.br